

DAIRIN

ベッド用陰圧フード
NP-DOME



0.3 μ mの粒子まで捕捉可能な
HEPAフィルターを搭載

陰圧化で安全な空間を


簡単設置、すぐに陰圧化可能
(AC100V駆動)

折り畳み可能で収納もらくらく

既存のベッドを簡単に陰圧化

ベッドに合わせて設置するだけで、陰圧スペースを簡単に構築することができます。

各部の働き

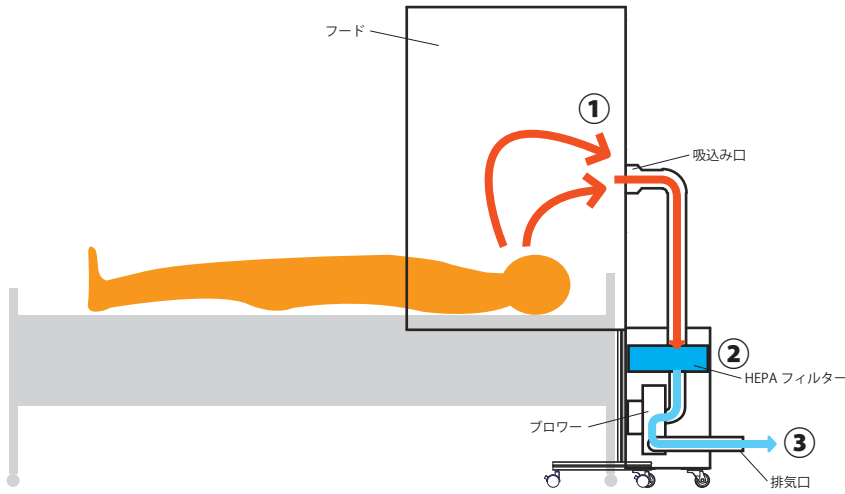


→ フード内空気 (汚染側)
→ 清浄後空気

- ① 患者様の呼気は吸込み口から吸引されます。
- ② 吸引された空気はHEPA フィルターを通り清浄されます。
- ③ 清浄された空気はブローによって排気されます。

上記①～③の働きにより、フード内が陰圧に保たれ汚染された空気をフード外に拡散しません。

寸法図

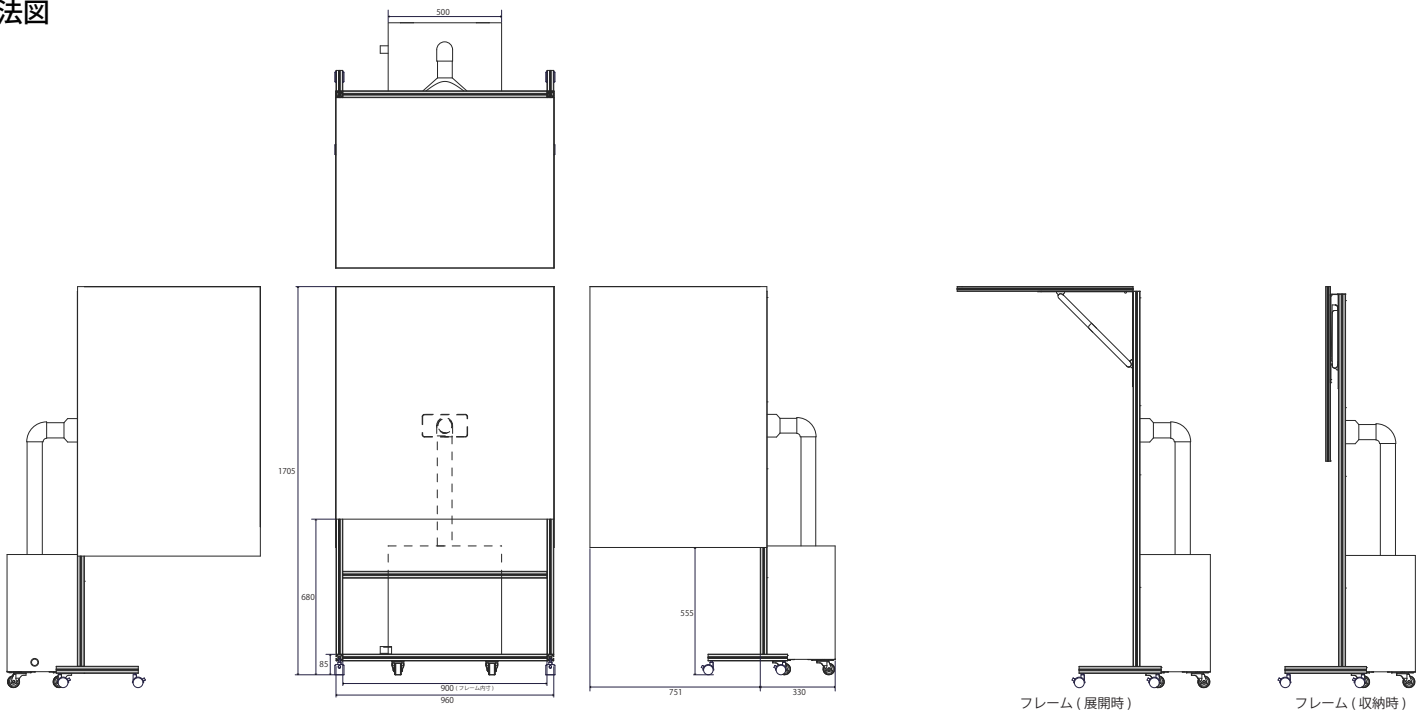

仕様

NP-DOME ベッド用陰圧フード	
外形寸法 W x D x H (mm)	960 x 1081 x 1705
電源	単相AC100V
集じん効率 (%)	0.3 μm粒子径にて99.99以上
風量 (m ³ /min)	2.2(50Hz) / 2.6(60Hz)
消費電力 (W)	70
質量 (kg)	約30kg

* 本製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

Copyright © 2022 Dairin Co., Ltd.
22C001

最新情報は当社ウェブサイトをご覧ください



ダイリン株式会社 公式サイト
<https://dairin-co.com/>

発売元:



ダイリン株式会社
〒242-0025 神奈川県大和市代官2-12-47
Tel: 046-279-5711

代理店: